

徘徊性認知症でお困りの方に、

新しい認知症外出通報システム

が誕生しました!

一ヶ月無料モニターキャンペーン実施中!


簡単なアンケートにお答えいただくだけです。

- ① お年寄りの外出を音と光でお知らせします。
- ② ご利用者には、何も持たせません。
- ③ ご家族の外出は、反応しない設計です。

ご家族が認証キーを持つことで



ご利用者には何も持たせません

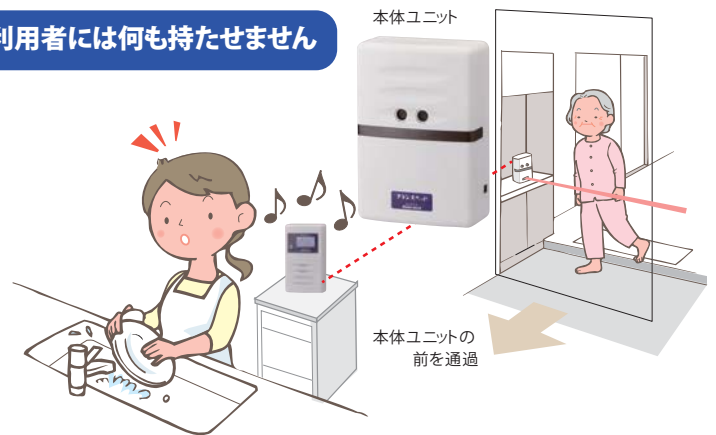

キーを識別するので音は鳴りません

ご家族であることを認識

認証キーを持ったご家族・介護者が本体ユニットの前を通過しても、本体ユニットが関係者であることを識別します。

光と音と画面表示で家族にお知らせ!

玄関を通過するとお知らせ

認証キーを持たないご利用者本人が本体ユニットの前を通過すると、人感センサーが反応し識別→受信機を持つご家族・介護者に音と光と画面表示でお知らせします。

認知症外出通報システム

おでかけ キッチン



リハテック
Reha tech

●介護保険レンタルが使えます!!

お気軽にお申し込み下さい。

逆転の発想
から生れた!

何も持たない、負担をかけない「認知症外出通報システム」

認知症外出通報システム

おでかけキャッチ

リハテック
Reha tech

逆転の発想から生まれた認知症外出通報システム「おでかけキャッチ♪」

「おでかけキャッチ♪」は家族が車の鍵サイズの認証キーを持ち、何も持たない認知症患者が通ると、光と音で家族に知らせるというこれまでの徘徊防止システムとは逆の仕組みになっているので、認知症患者が「認証キーをなくしてしまう」「装着タイプの認証キーを外してしまい徘徊を検知できない」等これまでの徘徊センサーではできなかったニーズに応えられる新システムです。在宅介護において住み慣れた住まいで暮らし続けたいと願うご利用者様とご家族をサポートするために「おでかけキャッチ♪」は生まれました。

- 本体ユニットと受信機は最大3台まで増設可能*
※認証キーの増設に制限はありません。
- 認証キー検知距離：約1m
- 本体ユニット～壁間の推奨距離約1m以下
- 本体ユニット推奨取付高さ：床から1m以下
- 人感センサー検知距離：約2m
- 本体ユニットと受信機の通信距離：約400m(見通し)
※設置状況および周辺環境により到達距離が短くなることがあります。
(建物の材質により変わります)

商品名	本体ユニット	受信機	認証キー	TAISコード
おでかけキャッチ WS-01 112セット	1	1	2	00200-000556
おでかけキャッチ WS-01 122セット	1	2	2	00200-000557
おでかけキャッチ WS-01 132セット	1	3	2	00200-000562
おでかけキャッチ WS-01 212セット	2	1	2	00200-000558
おでかけキャッチ WS-01 222セット	2	2	2	00200-000559
おでかけキャッチ WS-01 232セット	2	3	2	00200-000563
おでかけキャッチ WS-01 312セット	3	1	2	00200-000560
おでかけキャッチ WS-01 322セット	3	2	2	00200-000561
おでかけキャッチ WS-01 332セット	3	3	2	00200-000564



認知症外出通報システム
おでかけキャッチ WS-01

介護
レンタル

一般
レンタル

*認証キーの追加は1個あたり月額216円です(一般レンタル)

112セット /036779112

利用者負担1割	864 円(税込)
利用者負担2割 1,728円(税込)	月額レンタル料 8,640円(税込)
購入	224,640 円(税込) 本体価格208,000円

122セット /036779122

利用者負担1割	972 円(税込)
利用者負担2割 1,944円(税込)	月額レンタル料 9,720円(税込)
購入	257,040 円(税込) 本体価格238,000円

132セット /036779132

利用者負担1割	1,080 円(税込)
利用者負担2割 2,160円(税込)	月額レンタル料 10,800円(税込)
購入	289,440 円(税込) 本体価格268,000円

212セット /036779212

利用者負担1割	1,404 円(税込)
利用者負担2割 2,808円(税込)	月額レンタル料 14,040円(税込)
購入	395,280 円(税込) 本体価格366,000円

222セット /036779222

利用者負担1割	1,512 円(税込)
利用者負担2割 3,024円(税込)	月額レンタル料 15,120円(税込)
購入	427,680 円(税込) 本体価格396,000円

232セット /036779232

利用者負担1割	1,620 円(税込)
利用者負担2割 3,240円(税込)	月額レンタル料 16,200円(税込)
購入	460,080 円(税込) 本体価格426,000円

312セット /036779312

利用者負担1割	2,160 円(税込)
利用者負担2割 4,320円(税込)	月額レンタル料 21,600円(税込)
購入	565,920 円(税込) 本体価格524,000円

322セット /036779322

利用者負担1割	2,268 円(税込)
利用者負担2割 4,536円(税込)	月額レンタル料 22,680円(税込)
購入	598,320 円(税込) 本体価格554,000円

332セット /036779332

利用者負担1割	2,376 円(税込)
利用者負担2割 4,752円(税込)	月額レンタル料 23,760円(税込)
購入	630,720 円(税込) 本体価格584,000円

(共通) ■[本体ユニット]サイズ：幅14.5×奥行7×高さ21cm 重量：700g [受信機]サイズ：幅8×奥行2.9×高さ13.5cm 重量：210g [認証キー]サイズ：幅3.4×奥行1.4×高さ7.9cm 重量：30g
■電源：認証キー／ボタン電池使用 受信機／充電式リチウムイオン電池 ●フランスベッド(株)

お申込み・お求め・お問い合わせは

フランスベッド
フランスベッド株式会社
0120-083413
http://www.francebed.co.jp/