

2021年2月25日

報道関係各位

介護業界初、スプリングマットレスの端を沈みにくくする独自特殊加工
“立ったり座ったりしやすい”「介護用スプリングマットレス」の
販売および介護・一般レンタルを開始
通気性に優れた「高密度連続スプリング®」を採用

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、マットレスの端が沈み込みにくく、“立ったり座ったりしやすい”介護用スプリングマットレス「SM-12 SUF PW」の販売および介護・一般レンタルを、2021年2月25日(木)より開始いたします。

介護用スプリングマットレス「SM-12 SUF PW」には、フランスベッドの一般家庭用のマットレスで使用している独自開発の「高密度連続スプリング®」を採用し、介護用のマットレスでは珍しく、スプリングマットレスの寝心地※1を実現しました。介護用ベッドの背上げや、脚上げ、サイドアップ機能※2にも対応しています。

加えて、マットレスの全周に特殊加工を施しマットレスの端を強化するフランスベッド独自の特殊加工「プロ・ウォール®」を施しています。マットレスの端に体重をかけても沈みこみにくく、端座位がとりやすくなることで、安定した立ち上がりや移乗を行うことができます。ベッド上の動作も安定するため不意な転落や転倒を予防します。また、介助の際もマットレスが沈みにくいため、ご利用者を移動させやすく介護者の負担も軽減します。

従来、マットレスの端を強化した介護用ウレタンマットレスは展開しておりましたが、より安定感のある寝心地の良いスプリングマットレスでの仕様を要望する声が上がっており、今回フランスベッドの一般用マットレスで培った技術を活用し、介護業界初となるマットレスの端を強化した介護用スプリングマットレスを開発いたしました。

“立ったり座ったりしやすい”介護用スプリングマットレス「SM-12 SUF PW」に関する商品概要は下記の通りです。

※1 「高密度連続スプリング®」は、通気性に優れ、高温多湿の日本の気候に最適な構造となっています。また、一本の鋼線で編み上げられたスプリングが、体圧を面全体で受け止めるため、部分的な落ち込みを軽減、寝返りを支援します。

※2 フランスベッドの独自機能で、両サイドの床板が身体を包み込み安定した座位姿勢を保ち、ベッドからの転落を予防します。




フランスベッドホールディングス株式会社

“立ったり座ったりしやすい”介護用スプリングマットレス「SM-12 SUF PW」 商品概要


【特 長】

1. 通気性、体圧分散性に優れる独自開発の「高密度連続スプリング®」を採用
2. 独自の特種加工でマットレスの端を強化し、安定した端座位や移乗を実現
3. マットレスの有効面積が広く、ベッド上の動作が安定し不用意な転落や転倒を予防
4. 介助の際、ご利用者の移動を安定して行えることで介護者の負担も軽減
5. フランスベッドの介護用リクライニングベッドに対応し、背上げ、脚上げ、サイドアップ機能にスムーズにフィット


■特殊加工「プロ・ウォール®」

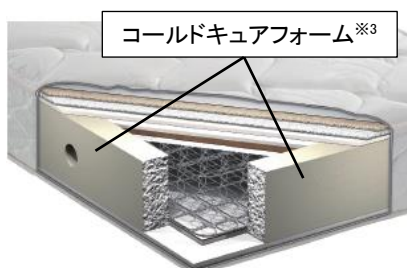

※3 低温で発泡させたウレタンフォーム
一体成型加工のコールドキュアフォーム
でマットレスの端をしっかり強化

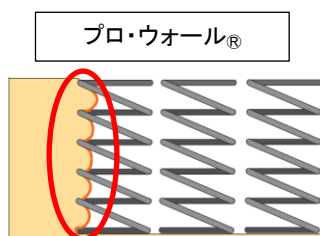


一体成型加工のコールドキュア
フォームをスプリングの一部に組
み込ませる

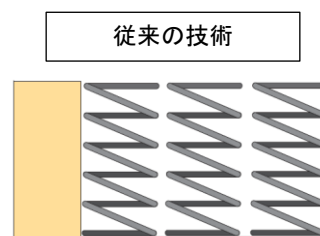

マットレスの端が強化され沈みこみが少ないため、端座位がとりやすく移動をさせやすい。
また、ベッドのどの部分に移動しても寝姿勢の崩れを防ぎ、快適な睡眠をサポート。

■「高密度連続スプリング。」

個々のスプリングを不織布で包むなどの加工を施していないため、**通気性に優れマットレス内に空気が滞留しにくく、高温多湿の日本の気候に最適な構造**となっています。また、一本の鋼線で編み上げられたスプリングが、体圧を面全体で受け止めるため、部分的な落ち込みを軽減、寝返りを支援し、耐久性も向上します。

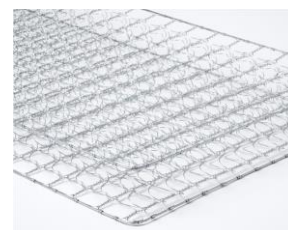

高密度連続スプリング®

【仕様・価格】

	【91 幅】	【91 幅ショート】
サイズ	幅 91 × 長さ 195 × 厚さ 12cm	幅 91 × 長さ 181 × 厚さ 12cm
重量	15kg	14kg
材質	高密度連続スプリング®、ウレタン	
月額レンタル価格	2,060 円 (税込) 1,900 円 (非課税)	
介護保険利用者負担 1 割	206 円 (税込) 190 円 (非課税)	
介護保険利用者負担 2 割	412 円 (税込) 380 円 (非課税)	
販売価格	66,000 円 (税込) 60,000 円 (非課税)	
TAIS コード	00200-000821	00200-000822

【発売・レンタル開始日】 2021 年 2 月 25 日 (木)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】

フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、全国の介護ショップ、EC サイトなど

・ホームケア全科オンライン: <https://medical.francebed.co.jp/kaigoyouhinonline/>

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413*
※固定電話の場合: 最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります