

2020年5月22日

報道関係各位

寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形
介護ベッド「離床支援マルチポジションベッド」の
販売および介護・一般レンタルを開始

利用者の“自立”を支援し、介護者不足・老老介護など日本の介護課題を解決

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形し、利用者の自立支援や介護者の負担軽減を実現する介護用電動ベッド「離床支援マルチポジションベッド」の販売および介護・一般レンタルを、2020年5月下旬より順次展開いたします。

「離床支援マルチポジションベッド」は、「介護人材の不足」や「老老介護」などの介護における課題解決を目指し、フランスベッドが5年をかけて開発した介護用電動ベッドです。日常生活の様々なシーンに応じてベッドが変形するため、立ち上がりや移乗をサポートし、利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に繋がります。



フランスベッドホールディングス株式会社

〒163-1106 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー 6階 TEL:03-6741-5501 FAX:03-6741-5500 <https://www.francebed-hd.co.jp>

リクライニングポジション(ベッド上・座位)では、背上げ・脚上げに加えて、サイドアップ機能によって安定したリラックス姿勢を実現します。シーティングポジション(端座位)では、ベッドが椅子のように変形し、後ろに転倒することもなく、足底を床にしっかり付ける座位をとることができます。スタンディングポジション(立ち上がり)では、座面部分がリフトアップすることで、利用者の立ち上がりや介護者によるベッドからの移乗をサポートします。

寝姿勢から立ち上がり姿勢までの操作はボタン 1 つで完結するため、利用者や介護者に負担をかけません。またシーティングポジションでは、安定した座位を実現するだけでなく、背上げ角度や膝の角度を自由に調整できるため、様々なリハビリを行うことができます。


停電時には、付属のバッテリーによりベッドポジションまで戻すことが可能なため、有事の際にも安心してお使いいただけます。

フランスベッドは、これまで介護現場での事故防止や介護者の労力軽減を図るため、「超低床フロアーベッド」、「自動寝返り支援ベッド」、「見守りケアシステム搭載ベッド」などを展開してまいりました。そしてこの度、安定した座位が保てる、臥位から座位そして立位までにかかる負荷が少なく、車いすへの移乗や歩行までの支えができるなど、お客様のご要望に応えた「離床支援マルチポジションベッド」を開発いたしました。

今後もフランスベッドは、長年の介護ベッド開発のノウハウを活かした、高付加価値商品を開発し提供してまいります。

「離床支援マルチポジションベッド」に関する商品概要は下記の通りです。

「離床支援マルチポジションベッド」商品概要

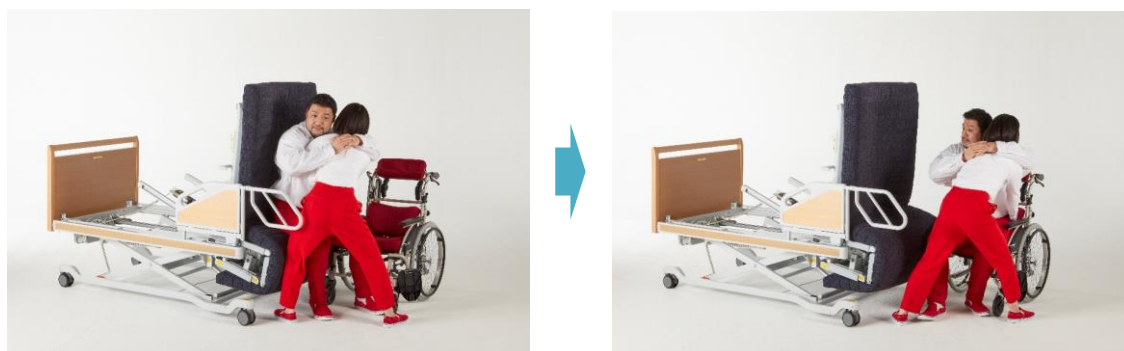

車いすへの移乗でも、介助者の負担を軽減

【特 長】

1. 日常生活の様々なシーンに応じてベッドが4つのポジションに変形
2. 立ち上がりや移乗をサポートし、利用者の自立支援や介護者の負担を軽減
3. ベッドの変形は1つのボタンで簡単操作
4. 背上げ角度や膝の角度を自由に調整でき、様々なリハビリに対応
5. 停電時には付属のバッテリーでベッドポジションまで戻すことが可能

【動 画】

https://medical.francebed.co.jp/brand_site/multi_position/

【仕様・価格】

	固定脚	キャスター脚
サイズ	幅 120 × 高さ 86 ~ 126 × 長さ 206cm	幅 130 × 高さ 86 ~ 126 × 長さ 206cm
ベッドフレーム重量	149kg(グリップ有)	152kg(グリップ有)
傾斜角度	背上げ:0° ~75°、脚上げ:0° ~20°	
最大利用者重量	約 170kg	
安全使用荷重	約 200kg	
月額レンタル価格	16,500 円(非課税)	18,140 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,650 円(非課税)	1,814 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	3,300 円(非課税)	3,628 円(税込)
販売価格	880,000 円(非課税)	990,000 円(税込)
TAIS コード	00200-000800	00200-000799

【発売・レンタル開始時期】

2020 年 5 月下旬 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県

2020 年 7 月上旬 長野県、新潟県、広島県、福岡県

2020 年 8 月上旬 関東地域

2020 年 9 月上旬 関西地域

以降、順次全国展開予定

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売・レンタルに関する問い合わせ先】

フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、全国の介護ショップ、全国の家具販売店、EC サイトなど

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413※
※固定電話の場合: 最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります