

2019年4月12日

新介護商品ブランド「マルチフィットシリーズ」を展開
介護ベッド「マルチフィットベッド MFB-930」の
販売および介護・一般レンタルを開始

利用者の身長やお部屋の大きさに合わせて3サイズに調整可能

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、使う人の身体に合わせることが可能な、“フィッティング”をコンセプトとした新ブランド「マルチフィットシリーズ」を立ち上げました。その第1弾商品として、可変型ボトムやヘッドアップ/サイドアップ機能等を搭載し、機能性とシンプルなデザインを両立した介護ベッド「マルチフィットベッド MFB-930」の販売および介護・一般レンタルを、2019年4月16日(火)に開始いたします。

本商品には、1台のベッドで利用者の身長やお部屋の大きさに合わせてマットレスサイズをショート(181cm)、レギュラー(195cm)、ロング(209cm)にサイズ調整が可能な新床板「マルチフィットボトム」を採用しました。レギュラーサイズ時には、膝曲げの位置を3サイズに調整できる膝位置フィットで違和感なくご利用いただけます。また、販売代理店やレンタル事業者にとっては、お客様に合わせてサイズを調整して展開可能なため、在庫負担の軽減を図ることができます。

さらに、頭部を起し視界を広げるヘッドアップと、体幹保持をサポートするサイドアップを搭載。ヘッドアップでは、頭部を20度まで上げることができ、誤嚥(ごえん)リスクの予防となるほか、天井に向いていた視線を前方に向けられることで視界が広がります。サイドアップでは、背上げ機能と連動し、身体を包み込むように両サイドが30度まで上がり、座位姿勢を安定させベッドからの転落を予防します。

その他、マットレスとボトムの間に隙間を空け、通気性を向上させた「エアブリーズボトム」や垂直昇降機構を搭載。また、背・脚の角度や利用状況等をモニタリングできる液晶画面搭載の手元スイッチを採用しています。

フランスベッドは今後、本商品を介護ベッドの基幹商品として積極的に拡販を行って参ります。新介護ベッド「マルチフィットベッド MFB-930」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

新介護ベッド「マルチフィットベッド MFB-930」 商品概要



マットレスは別売りです


【特長】

■マルチフィットボトム

利用者の身長や部屋の大きさに合わせてサイズ調整が可能な可変型のボトムです。

ボトムサイズ	対応マットレスサイズ	適用身長
ショート	91 × 181cm	～160cm
レギュラー	91 × 195cm	～180cm
ロング	91 × 209cm	～195cm


レギュラーサイズ時には、
膝位置フィットで膝曲げの位置を
3サイズ(25、28.5、32cm)に調整できます。

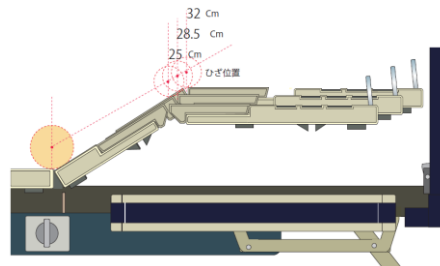

■ヘッドアップ／サイドアップ機構

ヘッドアップ: 通常の背上げから更に頭を起こすことで、視線を前方へと移し、視界も広がります。
顎が下がることで、誤嚥を予防します。

サイドアップ: 背上げ機能と連動し、両サイドの床板を持ち上げることで体幹保持をサポートし、
転落を予防します。

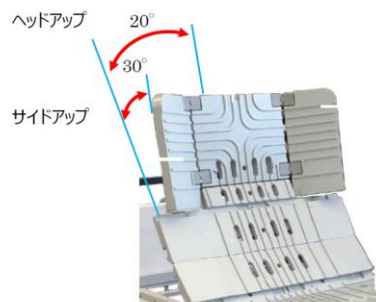

■エアブリーズボトム


マットレスとボトムの間に隙間を
空けることで通気性を高め、湿気を
抑え、眠りの質を高めます。



■垂直昇降機構

低床 25cm から、立ち座り及び介護がしやすい 64cm まで垂直で昇降できる垂直昇降リンク機構を搭載。スイングしながら昇降するベッドに比べ、設置場所の省スペース化を実現します。

*設置スペースは従来品より 8cm 短くなります(当社比)

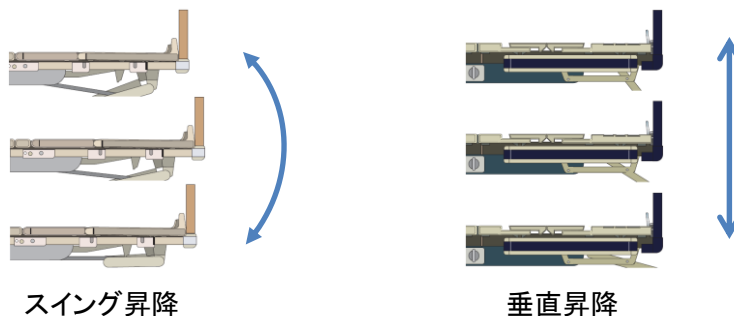

■液晶搭載手元スイッチ

背・脚の角度、昇降高さを液晶に表示。背上げ回数・脚上げ回数・昇降回数をモニタリングし、カウントも可能です。



【仕様・価格】

	固定脚	キャスター脚
ベッドサイズ(cm)	ショート:全幅 100×全長 195.5×全高 66.5~105.5 レギュラー:全幅 100×全長 209.5×全高 66.5~105.5 ロング:全幅 100×全長 223.5×全高 66.5~105.5	
ボトム最大傾斜角度	背上げ:~72度、脚上げ:~40度	
重量(kg)	約 91	
耐荷量(kg)	170(ご使用者の制限体重は 135kgとなります)	
材質	本体:スチール、鋼管、鋼板、アルミ、樹脂成型品 ボトム(床板):ポリプロピレン	
電源	AC100V、50/60Hz、115W(連続使用時間 2分)	
月額レンタル価格	13,000 円(非課税)	14,040 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,300 円(非課税)	1,404 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	2,600 円(非課税)	2,808 円(税込)
販売価格	オープン価格	
TAIS コード	00200-000766	00200-000767

【発売日・レンタル開始日】 2019 年 4 月 16 日(火)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売場所】 「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります