

2025 年 12 月 19 日

フランスベッドホールディングス株式会社

静かな夜を取り戻す。いびき対策まくら『シレア』発売

いびきに悩む人必見！フランスベッドが提案する新発想のアプリ連携枕

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、いびき対策まくら「シレア」を 2025 年 12 月 20 日(土)に発売します。




いびき対策まくら「シレア」 カラー：グレー

フランスベッドが 2025 年 2 月に実施した「いびきに関する実態調査※」では、ご自身のいびきに悩む人は約半数、家族やパートナーのいびきに悩む人は 57.3%にのぼり、過去最多となりました。いびきは睡眠の質を下げただけでなく、周囲の生活にも深刻な影響を与えることが分かっています。こうした課題に対応するため、フランスベッドは独自アルゴリズムでいびきを検知し、枕内部のエアバッグを膨らませて頭の向きを変えることでいびきを軽減させるいびき対策まくら「シレア」を開発しました。

「シレア」は、いびきを検知すると枕内部のエアバッグが膨らみ、頭の向きを変えることでいびきを軽減します。仰向けで寝ると舌や喉の奥の柔らかい部分が重力で下がり、空気の通り道(気道)が狭くなることでいびきが発生しやすくなりますが、頭を横に向けることで気道が広がり、空気の流れがスムーズになることで、いびきが起きにくくなります。また、動作音は 30dB 以下と非常に静かで、図書館やささやき声と同程度の静けさを実現しており、眠りを妨げないレベルです。

さらに、枕の高さは内蔵エアバッグを使って 3 段階で調整でき、専用アプリから Bluetooth 接続で簡単に設定可能です。体型や好みに合わせて最適なポジションに調整できるほか、アプリではいびきの状態をグラフ化し、録音機能も搭載。日・週単位でレポートを保存できるため、睡眠改善の取り組みに役立ちます。

フランスベッドは、いびきの可視化と軽減を実現し、快適な睡眠環境をサポートする新しい選択肢をご提案、ご提供いたします。

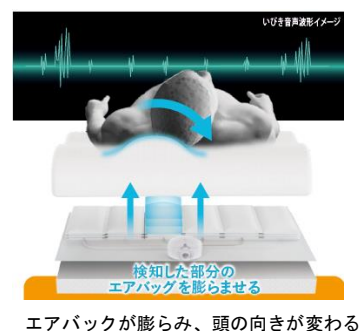

※2025 年いびきに関する実態調査: <https://interior.francebed.co.jp/news/detail.php?id=776>

※ニュースリリースに記載の情報は、配信時点の内容に基づいております。予告なく内容の変更や展開終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

いびき対策まくら「シレア」の概要



【特長】

- ・いびきを検知しエアバッグで頭の向きを変える
- ・動作音 30dB 以下（図書館やささやき声レベル）
- ・専用アプリでいびきの状態を可視化・録音
- ・専用アプリで枕の高さ 3 段階調整可能

いびきを検知するとエアバッグが膨らみ頭の向きを変える



専用アプリでいびきの状態を可視化



【仕様・価格】

サイズ (cm)	本体:幅 56×奥行 35×厚み 9 枕カバー:幅 56×奥行 35×高さ 9 コントロールボックス:幅 37×奥行 11×高さ 10 エアケーブル:145
カラー	枕カバー:グレー・ダークグレーの2色各1枚入り(グレー色は初期装着済み)
組成	本体:ウレタンフォーム 枕カバー:ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%
重量	3.6kg(カバー装着済みのまくら本体、コントロールボックス、エアケーブル)
価格	69,300 円(税込)/63,000 円(税別)

※商品の詳細はこちらからご確認ください

フランスベッド HP: <https://interior.francebed.co.jp/products/model.php?k=21&b=0399&m=026565>

【生産】中国

【発売日】2025 年 12 月 20 日(土)

【販売】フランスベッド株式会社

【販売先】フランスベッド公式ホームページ、自社展示場、全国の家具店、百貨店、量販店、EC サイトなど

【初年度販売目標】1,000 個

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株) 経営企画部
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) お客様相談室 TEL: 0120-39-2824