

2017年12月21日

報道関係各位

老々介護など在宅介護の課題を解決、介護者の身体的負担を軽減
「自動寝返り支援ベッド」の介護および一般レンタルを開始
24時間自動的に体位変換を行なえる『自動運転機能』を搭載

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、介護者の身体的負担を軽減する「自動寝返り支援ベッド FBN-640」の介護・一般レンタルおよび販売を、2018年1月10日(水)より開始いたします。

当社では2017年5月より、全国の病院や介護福祉施設を対象に「自動寝返り支援ベッド」を販売していますが、社会問題にもなっている老々介護などの課題解決に向け、今回在宅向けに展開いたします。

「自動寝返り支援ベッド FBN-640」は、身体を動かすことが困難な方を抱え上げることなく、電動操作で床板が左右に傾き体位変換を行なえる『寝返り支援機能』を備え、利用者の体圧を分散し床ずれを予防します。また、寝返り角度や時間、速度などを細かく設定でき、24時間自動的に作動する『自動運転機能』を備え、昼夜問わず体位変換をサポートする介護者の身体的・精神的負担を軽減します。


従来の介護ベッド同様、高さ調節をはじめ、背上げ、脚上げが行え、背上げしたままでも『寝返り支援機能』を使えるため、誤嚥(ごえん)の予防にも繋がります。ご家庭のインテリアに馴染みやすい木目調のデザインを採用しました。

「自動寝返り支援ベッド FBN-640」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「自動寝返り支援ベッド FBN-640」 商品概要

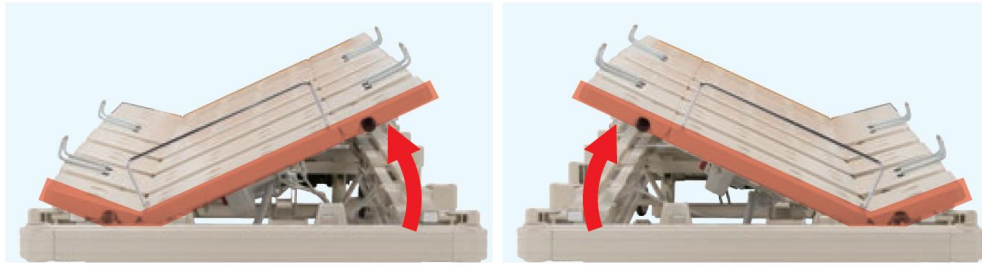

左右に傾き、寝返りを支援(自動運転時 10度まで傾く)



設定コントローラ



誤操作防止ロック機能付きの手元スイッチ



【特長】

1. 体圧を分散し床ずれを予防する『寝返り支援機能』
2. 介護者の身体的負担を軽減する、24時間対応の『自動運転機能』
3. 用途に合わせて、背上げ・脚上げ・高さ調節が可能

【仕様・価格】 キャスター脚を取り付けた場合、ベッドは課税対象となります

	固定脚	キャスター脚
サイズ(cm)	全幅 97.2×全長 210.7×全高 75.6~109.6 ボトム面高 32~66(ストローク 34)	
ボトム最大傾斜角度	背上げ:~72度、脚上げ:~24度	
重量(kg)	105	108
耐荷量(kg)	170(ご使用者の制限体重は 135kgとなります)	
素材	フレーム:鋼管、鋼板、エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂成型品 ボトム:鋼管、鋼板、エポキシ樹脂粉体塗装、抗菌剤入ポリプロピレン樹脂	
電源	AC100V、50/60Hz、130W(連続使用時間 2分)	
月額レンタル価格	16,500 円(非課税)	17,820 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,650 円(非課税)	1,782 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	3,300 円(非課税)	3,564 円(税込)
販売価格	680,000 円(非課税)	756,000 円(税込) 本体価格 700,000 円
TAIS コード	00200-000695	00200-000696

【発売日・レンタル開始日】 2018年1月10日(水)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります